

**Badelift Stairless**  
kann auch alleine bedient werden




- Leichte Bauweise mit Rundrohren zum Zusammenstecken
- Transportabel
- Mit geradem Schienenauslauf am Beckenrand
- Sicherer Stand ohne Bohren oder Klemmen

**Ideal für Senioren, immobile Personen und Menschen mit Behinderung.**

Es ist uns gelungen, dieses erfolgreiche Konzept noch entscheidend zu verbessern. Das neue Modell besitzt eine leichte Schiene aus Rundrohren, die für das Aufstellen einfach zusammengesteckt werden können. Die Schienen können auf dem Beckenrand weiter geführt werden, so dass das Umsetzen für den Benutzer noch bequemer und angenehmer wird. Der Benutzer fährt mit dem Stuhl auf dem Laufwagen waagrecht bis zum Beckenrand und dann schräg in das Becken hinein. Der Stuhl kann nun tiefer in das Becken hinein fahren, was das Ein- und Aussteigen erleichtert.

Da das System ohne Befestigungselemente am Becken oder Zusatzinstallation in Betrieb genommen werden kann, ist es universell in Hallenbäderbecken, Freibädern, Bewegungsbädern und Therapiebecken nutzbar

Der Stairless ist mit einem 24V Wechselakkusystem ausgestattet und verfügt über eine mechanische und elektrische Not-Betätigung. Alle Elektrokomponenten sind spritzwassergeschützt (IP65). Die wasserdichte Handbedienung (IP66) kann mit ins Wasser genommen werden.

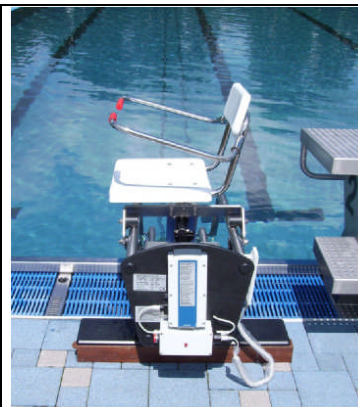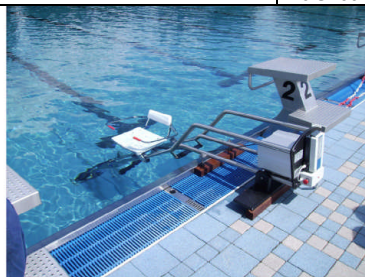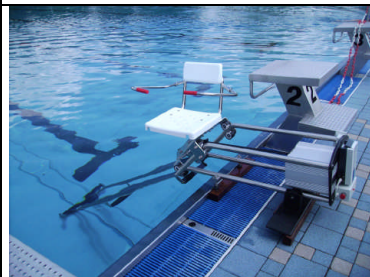

**Technische Daten:**

**Basiseinheit: Artikel-Nr. 90361; Zubehör (Sitz) nach Liste**

Max. Last: 150 kg

Fahrbahnsteigung: 45°

Wechselakku-System 24V mit Steuerung in spritzwassergeschützten Ausführung, Handbedienung wasserfest (IP66), externes Ladegerät zum Laden der Akkus

Mechanische Not-Betätigung des Fahrwagens

Not-Aus-Schalter / Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Schlauffeilsicherung als Auflaufschutz und Endabschaltung am unteren Fahrbahnende.

Hilfsmittelbedarf Gutzeit, Starenweg 11, 71394 Kernen

**Tel. 07151 6046743**

[anfrage@hilfsmittelbedarf.de](mailto:anfrage@hilfsmittelbedarf.de)